

HƯỚNG DẪN TỰ XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ




A. KIỂM TRA THÀNH PHẦN BỘ XÉT NGHIỆM



Khay thử (được đóng riêng trong từng túi giấy bạc có túi hút ẩm, còn hạn sử dụng)



Ống đệm chiết

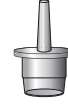

Nắp lọc







Tăm bông vô trùng

B. LẤY MẪU


Mẫu tăm bông ty hầu

- Đưa tăm bông vào lỗ mũi của bệnh nhân, sao cho tăm bông đạt độ sâu bằng khoảng cách từ cánh mũi tới nắp tai. Xoay tăm bông 3-4 lần áp vào thành ty hầu, sau đó lấy tăm bông ra khỏi khoang mũi một cách cẩn thận
- Đưa mẫu tăm bông ty hầu vào ống đệm chiết. Trong khi bóp chặt ống đệm chiết, xoay tăm bông ít nhất năm lần.
- Khi loại bỏ tăm bông, ép hai bên ống để chiết hết dịch lỏng từ tăm bông.
- Vặn chặt nắp lọc vào ống.

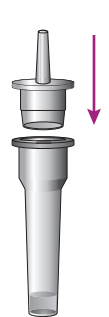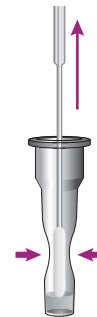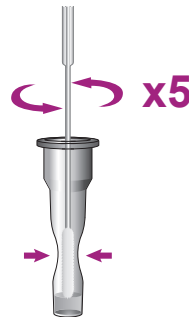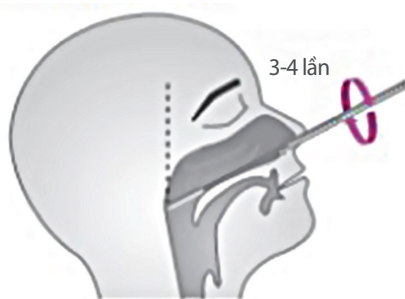


C. PHÂN TÍCH MẪU và NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Ghi tên người được xét nghiệm lên test. Nhỏ 3 giọt mẫu đã chiết vào giếng mẫu của khay thử
- Đọc kết quả xét nghiệm trong 15-30 phút
Không đọc kết quả sau 30 phút vì nó có thể làm kết quả sai

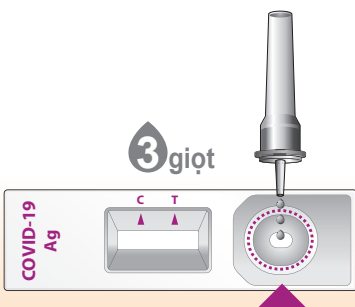

- Đặt khay thử trên bề mặt phẳng.
- Nhỏ mẫu theo hướng xuống góc 90°C với khay thử để tạo được giọt mẫu đầy và tránh bọt khí.

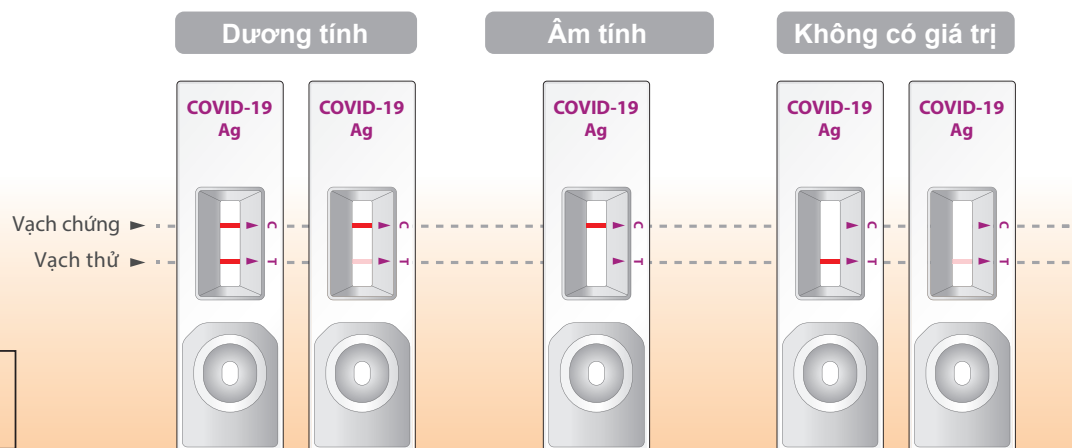

Mỗi loại test nhanh có điều chỉnh hướng dẫn khác nhau, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất